




Welch Allyn

Tensiomètre numérique ProBP™ 2000




Des mesures automatiques, rapides et précises de la tension artérielle à portée de main

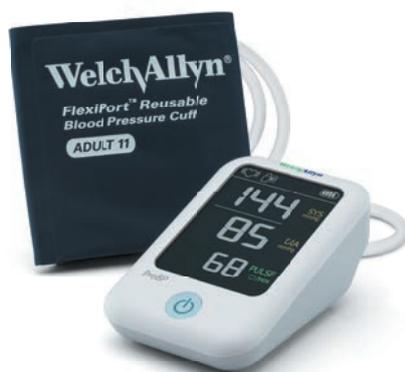

WelchAllyn®

Welch Allyn ProBP 2000 – le **TENSIOMÈTRE IDÉAL** pour votre environnement de soins

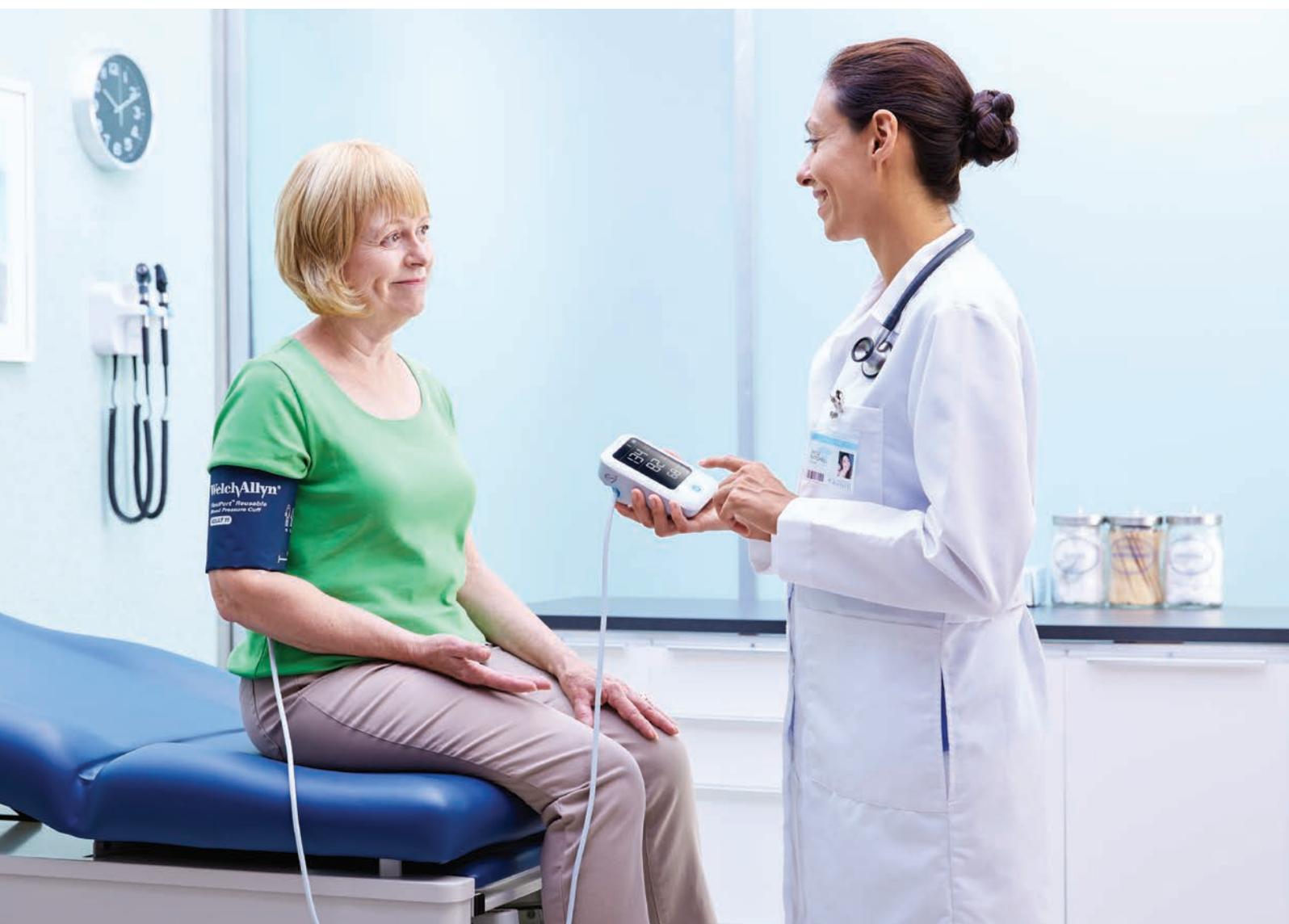

PRÉCISION



FIABILITÉ



RAPIDITÉ

La **précision** et la **fiabilité** sont essentielles en matière de tensiomètre numérique clinique. Welch Allyn a conçu le nouveau tensiomètre numérique ProBP 2000 intégrant des technologies pour des résultats fiables.

Nous avons combiné deux de nos technologies novatrices pour optimiser les examens pour vous et vos patients.

Technologie Welch Allyn SureBP®

Notre algorithme SureBP, basé sur un système de prise de pression à la montée, est utilisé sur les dispositifs de signes vitaux Welch Allyn. Il permet aux cliniciens de recueillir, dans chaque environnement de soins, des mesures automatiques, précises et rapides de la tension artérielle.

- Les mesures de la tension artérielle sont recueillies plus facilement après la montée en pression et au bout de 20 secondes environ
- Conforme aux normes AAMI en matière de précision de la tension artérielle
- Une seule touche suffit pour déclencher le dispositif et recueillir des mesures après le gonflage du brassard
- 97 % des résultats sont obtenus en présence de mouvements¹



“La technologie SureBP offre des avantages considérables en termes de rapidité et de confort du patient. Les cliniciens peuvent avoir davantage confiance dans cette nouvelle technologie.”

Dr Bruce S. Alpert | Université du Tennessee,
Président du Comité des sphygmomanomètres AAMI

Brassard de prise de tension artérielle Welch Allyn FlexiPort®

Il est important d'utiliser la taille de brassard appropriée pour obtenir des mesures précises. Les brassards Welch Allyn FlexiPort sont disponibles dans différentes tailles, ce qui permet de s'adapter à un plus grand nombre de patients et de s'assurer que la taille de brassard appropriée est utilisée à chaque fois pour des résultats précis.

- Le point de connexion unique encliquetable élimine les tubes et raccords des brassards classiques, ce qui permet d'optimiser les flux de travail encombrés
- Le tensiomètre ProBP 2000 est compatible avec les brassards réutilisables FlexiPort, allant de l'enfant à l'adulte et pouvant s'ajuster à la cuisse (de 15 à 55 cm)
- Lorsqu'il est associé à la technologie SureBP, le tensiomètre permet de recueillir des mesures après la montée en pression et au bout de 20 secondes environ¹



WELCH ALLYN
BRASSARDS DE PRISE DE TENSION ARTÉRIELLE
réutilisables FlexiPort®



Caractéristiques du tensiomètre numérique ProBP 2000

| | |
|------------------------|--|
| Dimensions externes | Largeur : 94 mm (3,70 po) Longueur : 142 mm (5,59 po) Hauteur : 66 mm (2,59 po) |
| Poids | 283 g (0,62 livre) sans piles |
| Écran | Écran LCD numérique avec V.A. 68 mm x 90 mm, affichage des mesures de la tension et du pouls |
| Options d'alimentation | 4 piles alcalines AA, 6 V CC (inclus) Alimentation secteur (107041) Entrée : 100 à 240 V, 50 à 60 Hz, 400 mA Sortie : 6 V, 1 |
| Méthode | Oscillométrique |
| Plage de mesure | Pression nominale du brassard : 0 mmHg à 299 mmHg (0 kPa à 40 kPa) Pression de mesure : Systolique : 50 à 260 mmHG Diastolique : 25 à 220 mmHG Pouls : 40 à 199 battements/minute |
| Précision | Pression : +/- 0,4 kPa (3 mmHg) Valeur du pouls : +/- 4 % |

Pièces et accessoires*

CONFIGURATIONS

- 2000** Tensiomètre numérique ProBP 2000, brassard BP réutilisable FlexiPort pour adulte, taille 11, 4 piles AA
- 2000-P** Tensiomètre numérique ProBP 2000, brassard BP réutilisable FlexiPort pour adulte, taille 11, 4 piles AA et alimentation secteur

ACCESSOIRES

107041 Alimentation secteur (adaptateurs US, UE, R-U, AU inclus)

BRASSARDS DE TENSION ARTÉRIELLE FLEXIPORT

- | | |
|---|--|
| REUSE-09 Enfant (15 à 21 cm) | REUSE-12 Adulte, grande taille (32 à 43 cm) |
| REUSE-10 Adulte, petite taille (20 à 26 cm) | REUSE-12L Adulte, grandes taille et longueur (32 à 43 cm) |
| REUSE-11 Adulte (25 à 34 cm) | REUSE-13 Cuisse (40 à 55 cm) |
| REUSE-11L Adulte, grande longueur (25 à 34 cm) | |

*Contactez votre représentant local Welch Allyn pour obtenir une liste complète des configurations et accessoires disponibles dans votre région.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.welchallyn.fr ou contactez votre représentant commercial Welch Allyn.

¹ Welch Allyn Motion Tolerance Clinical Study, août 2016

² Alpert, Bruce S., Clinical evaluation of the Welch Allyn SureBP® algorithm for automated blood pressure measurement. Blood Pressure Monitoring, Vol. 12 No. 4, août 2007.



Welch Allyn France
 100 Avenue de Suffren
 75015 Paris, France
 Tél. : +33 1 57 32 49 94
 france@welchallyn.com

WWW.WELCHALLYN.FR

WelchAllyn®

Hill-Rom®